



<b>EN:</b> Collect the saliva at least 30 minutes after eating, drinking, smoking or brushing your teeth. Do not insert saliva directly into the test tube. Do not bite the sponge. Wash or sanitize your hands before using the device. Do not use if the device is visibly damaged.	<b>IT:</b> La raccolta della saliva va effettuata almeno 30 minuti dopo aver mangiato, bevuto, fumato o lavato i denti. Non inserire saliva direttamente nella provetta. Non mordere la spugna. Lavare o igienizzare le mani prima di utilizzare il dispositivo. Non usare se il dispositivo è visibilmente danneggiato.	<b>ES:</b> La saliva debe recogerse al menos 30 minutos después de comer, beber, fumar o cepillarse los dientes. No coloque la saliva directamente en el tubo. No muerda la esponja. Lávese o desinfectese las manos antes de utilizar el dispositivo. No utilizar si el dispositivo está visiblemente dañado.	<b>DE:</b> Die Speichelprobe sollte frühestens 30 Minuten nach dem Essen, Trinken, Rauchen oder Zähneputzen gewonnen werden. Den Speichel nicht direkt in das Röhrchen geben. Nicht auf den Schwamm beißen. Die Hände vor der Verwendung der Vorrichtung waschen oder desinfizieren. Nicht verwenden, falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist.	<b>FR:</b> La salive doit être prélevée au moins 30 minutes après avoir mangé, bu, fumé ou brossé vos dents. Ne placez pas la salive directement dans le tube. Ne mordez pas dans l'éponge. Lavez ou désinfectez vos mains avant d'utiliser le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif s'il est visiblement endommagé.	<b>PT:</b> A saliva deve ser colhida pelo menos 30 minutos depois de comer, beber, fumar ou escovar os dentes. Não colocar saliva diretamente no tubo. Não morder a esponja. Lavar ou higienizar as mãos antes de utilizar o dispositivo. Não utilizar se o dispositivo estiver visivelmente danificado.	<b>NL:</b> Speeksel moet minstens 30 minuten na eten, drinken roken of tanden poetsen worden afgenomen. Doe het speeksel niet rechtstreeks in het buisje. Niet in het sponsje bijten. Was of ontsmet uw handen voordat u het hulpmiddel gebruikt. Het hulpmiddel niet gebruiken als het zichtbaar beschadigd is.
--	---	---	--	---	---	---

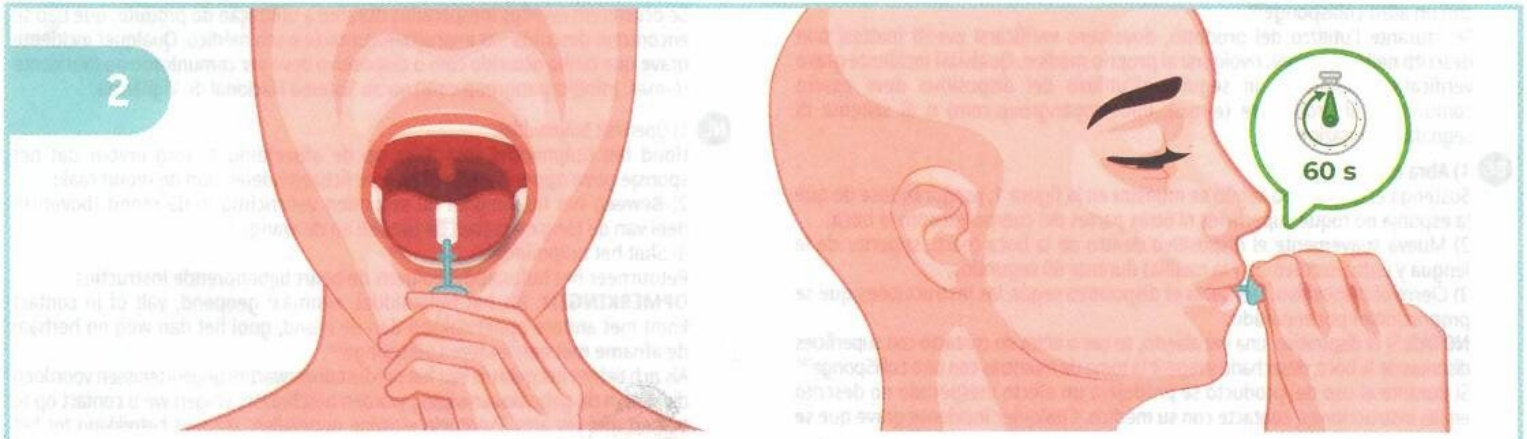

<b>EN:</b> Gently move the device inside the mouth (upper part of the tongue and between teeth and cheek) for 60 seconds.	<b>IT:</b> Muovere delicatamente il dispositivo all'interno della bocca (parte superiore della lingua e fra denti e guancia) per 60 secondi.	<b>ES:</b> Mueva suavemente el dispositivo dentro de la boca (parte superior de la lengua y entre los dientes y la mejilla) durante 60 segundos.	<b>DE:</b> Die Vorrichtung 60 Sekunden lang behutsam im Mund bewegen (Oberseite der Zungen und Zwischenraum zwischen Zähnen und Wange).	<b>FR:</b> Déplacez doucement le dispositif dans la bouche (dessus de la langue et entre les dents et la joue) pendant 60 secondes.	<b>PT:</b> Mover suavemente o dispositivo dentro da boca (parte superior da língua e entre os dentes e a bochecha) durante 60 segundos.	<b>NL:</b> Beweeg het hulpmiddel 60 seconden voorzichtig in de mond (bovenste deel van de tong en tussen de tanden en de wang).
--	---	---	--	--	--	--

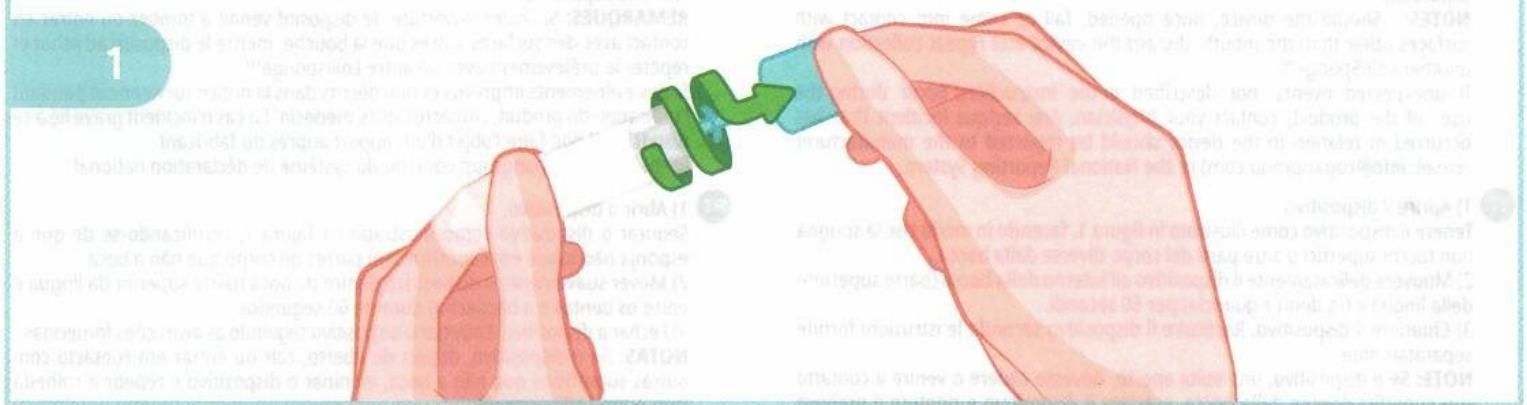